



AGITADOR DE EXTRACCIÓN AUTOMÁTICO
CON BALANZA

AUTOMATIC BLOOD EXTRACTOR AGITATOR
WITH BUILT IN SCALE



AE-500A

El modelo AE-500A es mucho más que un sistema para la automatización de las donaciones de sangre. Es un equipo para monitorear y almacenar automáticamente todas las donaciones del banco de sangre que además le permite transferir los datos de las extracciones directamente a su computadora.

The AE-500A model is much more than a system to automatize blood donations. It is an equipment built to monitor and store every donation automatically and you can also transfer all donations data directly to your computer.




Presvac

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

El AE-500A es un sistema simple, con un menú de comunicación con el usuario, que permite en forma rápida y segura la standarización y el control de las donaciones en un banco de sangre con transferencia de datos a través de una salida RS-232 y el procesamiento de los mismos por medio de nuestro software "SPCE".

The AE-500A is a simple system including an easy-to-use menu, which allows you to standardize and control the donations in a blood bank in a quick and secure way by transferring the information through an RS-232 port and processing them with our "SPCE" exclusive software.

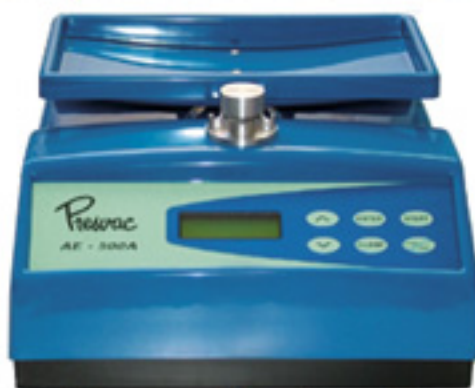

- Programación del volumen a extraer / **Programmable volume to be extracted.**
- Tara automática de la bolsa y anticoagulante / **Bag and anticoagulant automatic tare.**
- Clamp de obturación de tubuladura automático y manual / **Manual and automatic tubing obturation clamp.**
- Alarmas luminosas y audibles / **Visual and audible alarms.**
- Control y alarma de flujo bajo y alto / **Control and alarm of high/low flow.**
- Control y alarma indicadora de falta de tubuladura / **Control and alarm indicating lack of tubulure.**
- Agitación permanente de la unidad extraída / **Permanent agitation of the extracted unit.**
- Pantalla de Cristal Líquido (PCL) de dos líneas por 16 caracteres con información de tiempo de donación, flujo de donación (ml/s), volumen colectado y alarmas / **Liquid Crystal Display (LCD) with two rows, 16 characters each, showing donation time, donation flow (ml/s), volume collected and alarms.**
- Programación de las variables en Español, Inglés y Portugués / **English, Spanish and Portuguese setup.**
- Interfase de conexión a computador por salida RS-232 / **Computer interphase connection through RS-232 port.**
- Almacenamiento de hasta 500 donaciones con todos los parámetros / **Storage up to 500 donations with all parameters included.**
- Indicación automática de colocación de etiqueta en la bolsa / **Indication of put of label in bag.**
- Manijas de transporte en el gabinete / **Transporting handles on cabinet.**
- Sistema de autocalibración / **Autocalibrating system.**
- Batería de autocarga / **Autochargeable battery.**
- 48 hs. de autonomía de batería en uso / **48 hs. battery autonomy.**
- Indicadores de estado de la batería / **Battery status indicator.**

Opciones y Accesorios / Options and Accessories

Código de barras CCO / **CCO bar code.**

Cable de conexión de puerto RS-232 a PC / **RS-232 cable conector to PC.**

Software de procesamiento de datos "SPCE" / **"SPCE" data processing software.**

Distribuidor / **Distributor**